

Spencer 250 Brancard compact pliable en longueur

Ne possédant aucun pied de support, il est utilisé pour des déplacements rapides et surtout quand le patient doit être transféré sur un chariot brancard principal.

- Complet de deux sangles de maintien de couleur orange avec déverrouillage automatique
- Marquage réfléchissant pour augmenter la visibilité nocturne

Poids: 5 kg	
Charge utile: 170 kg	
Spencer 250 jaune	ST00250B
Spencer 250 orange	ST30250A
Spencer 250 militaire	ST10250B
Spencer 250 bleu	ST20250B
STX 11 sac de transport	ST00111A

Spencer 200 Brancard d'urgence pliable avec roues

Les caractéristiques structurelles et fonctionnelles du Spencer 200 le rendent optimal pour être utilisé comme brancard auxiliaire ou dans toutes les situations où il est nécessaire de le stocker en peu de place.

- Complet de deux sangles de maintien de couleur orange avec déverrouillage automatique
- Marquage réfléchissant pour augmenter la visibilité nocturne

Poids: 5,5 kg	
Charge utile: 170 kg	
Spencer 200 jaune	ST00200B
Spencer 200 orange	ST30200A
Spencer 200 militaire	ST10200B
Spencer 200 bleu	ST20200B
STX 11 sac de transport	ST00111A



Spencer 310 Brancard d'urgence pliable avec tête

Les caractéristiques structurelles et fonctionnelles du Spencer 310 le rendent optimal pour être utilisé comme brancard auxiliaire ou dans toutes les situations où il est nécessaire de le stocker en peu de place. Le châssis est en aluminium poli, les étriers et les pieds en acier inox. La toile est en Spentex® 600 D électrosoudée. La tête est réglable en plusieurs positions avec système de blocage mécanique de sécurité. Les roues antérieures et les pieds postérieurs sont déplacés vers le centre du brancard pour réduire l'encombrement du plan d'appui.


- Complet avec deux sangles de maintien de couleurs orange avec déverrouillage automatique
- Marquage réfléchissant pour augmenter la visibilité nocturne

Poids: 6,5 kg	
Charge utile: 170 kg	
Spencer 310 jaune	ST00310B
Spencer 310 orange	ST30310A
Spencer 310 militaire	ST10310B
Spencer 310 bleu	ST20310B
STX 11 sac de transport	ST00111A

N 6530-15-152-2917

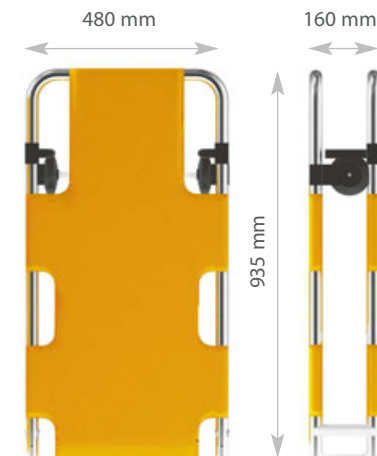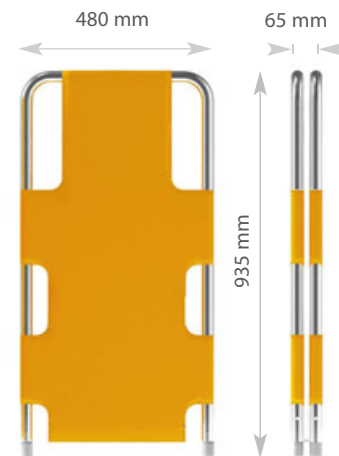

Disponible en différents coloris

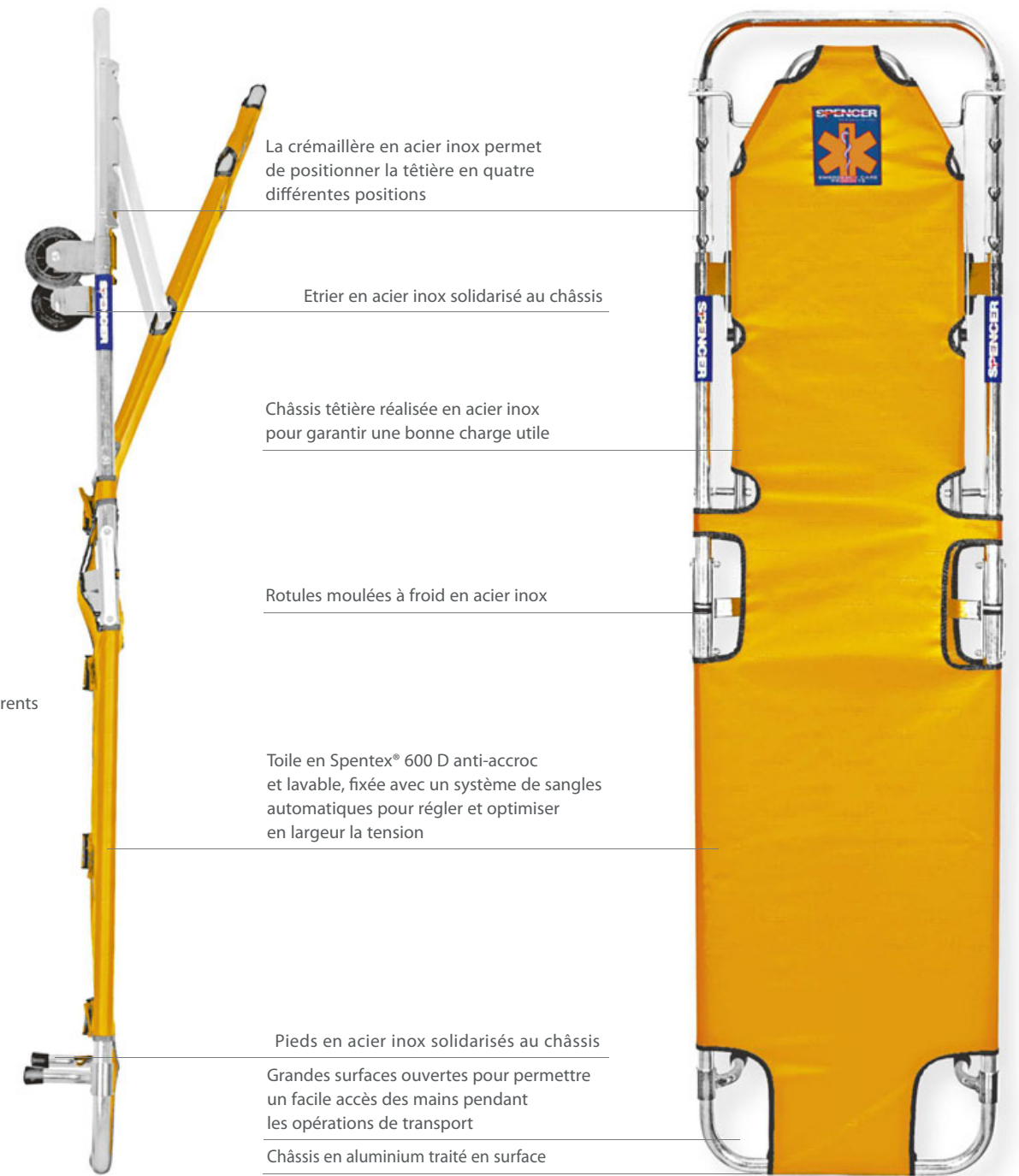

Série 200/300

Les caractéristiques structurelles et fonctionnelles des brancards Série 200/300 les rendent optimaux pour être utilisés comme brancard auxiliaire ou dans toutes les situations où il est nécessaire de les stocker dans peu de place. Le choix d'un alliage en aluminium particulièrement résistant nous a permis de réduire le poids, néanmoins en conservant des caractéristiques de charge utile exceptionnelles l'emploi d'acier inox pour les rotules, les par-

ties structurelles, les pieds et les étriers des roues confère au produit une parfaite et absolue résistance aux agents atmosphériques. Pas en dénier, le traitement superficiel de l'aluminium fait après le pliage garantit une longue durée. L'inclinaison de l'axe des roues et des pieds vers le centre permet de faire glisser le brancard même sur des plans d'appui étroits. La toile, opportunément modelée et renforcée

avec soudures à ultrasons, peut être réglée et mise en pré-tension, elle est facilement lavable et éventuellement elle peut être facilement remplacée.

S	C	Comp 404	LXF
E	HP	P 200 x 200 mm	col 03 min 01
X	link	p. 109	