




**SX-R**  
**Civière atraumatique compacte**

La civière de relevage dans la version originale, deux profils extrudés pour chaque côté, avec poids et prix contenu et avec la même fonctionnalité de la plus fameuse Spencer SX.

SX-R Red Key ST05002B

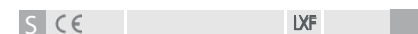

**Spencer SX**  
**Civière de relevage**

Grâce à la fonction "cuillère" exercée par les deux lames longitudinales il est possible de positionner la civière sous le patient sans le déplacer. La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter la plus part des patients.

Un soin attentif a été porté sur le choix et la définition des matières utilisées dans la fabrication, qui doivent répondre aux qualités requises de légèreté, résistance mécanique, fiabilité et durée. La silhouette de la civière de relevage a été étudiée pour améliorer son positionnement sous le corps du patient et en même temps pour stabiliser la victime pendant le transfert ou le transport. Elle est fournie avec trois ceintures de maintien avec fixation rapide.

Système rapide et sûr pour le déverrouillage et le verrouillage des deux demi civières

Les barres extrudées sont unies au châssis en aluminium avec l'interposition de fusions en alliage

Les grandes fentes sur le périmètre de la civière de relevage améliorent le soulèvement et le transport du patient


La zone centrale longitudinale, privée de structures métalliques, permet d'effectuer des radiographies

La surface concave contient le patient et, grâce au profil lamellaire extrudé, minimise les mouvements latéraux

Pommeau pour sélectionner la longueur de la partie distale de la civière

La partie terminale, pour l'immobilisation des pieds, est plus étroite pour améliorer la manœuvrabilité en milieux restreints

La civière de relevage est facile à stocker parce que d'un seul mouvement elle se replie sur elle même

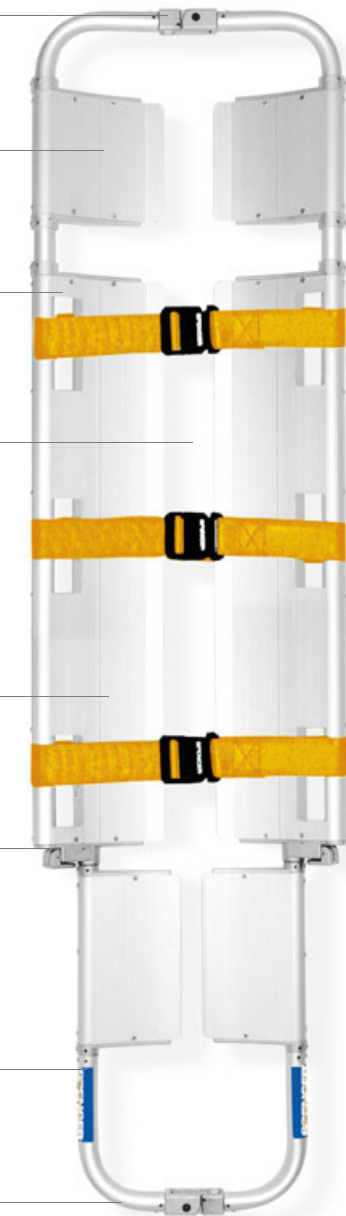

Extension minimale: 1665 mm  
Extension maximale: 2168 mm  
Extension repliée: 1200 mm  
Largeur: 435 mm  
Epaisseur: 65 mm  
Epaisseur repliée: 85 mm  
Poids Spencer SX: 9,5 kg  
Poids Spencer SX Red Key: 8 kg  
Charge utile: 170 kg

S	CE			LXF	
E	EN	P	80 x 20 mm	col 00	min 01
I	domaine	FR	MC	MI	VE
N	6530-15-148-4196				