

Spencer 100/100AT Brancard pliable en longueur

Spencer 100 est le brancard utilisé comme brancard auxiliaire dans l'ambulance ou comme brancard d'urgence dans les milieux industriels.

- Complet de deux sangles de maintien de couleurs orange avec déverrouillage automatique
- Marquage réfléchissant pour augmenter la visibilité nocturne
- Disponible aussi dans la version pour la décontamination

Spencer 100

Poids: 5,5 kg
Charge utile: 170 kg

Spencer 100 jaune	ST30099A
Spencer 100 orange	ST30100A
Spencer 100 militaire	ST30108A
Spencer 100 bleu	ST30109A

Spencer 100 AT

Poids: 5,5 kg
Charge utile: 170 kg

Spencer 100 AT orange	ST30096A
-----------------------	----------

Spencer 100 décontamination

Poids: 5,5 kg
Charge utile: 170 kg

Spencer 100 décontamination	ST30097A
-----------------------------	----------

Spencer 100 vétérinaire

Poids: 4,7 kg
Charge utile: 85 kg

Spencer 100 vétérinaire militaire	ST30098A
STX 11 sac de transport	ST00111A

Spencer 122 Brancard pliable en quatre

Grâce à son encombrement réduit il est utilisé comme brancard d'urgence là où il y a peu de place pour le stockage.

- Complet de deux sangles de maintien de couleur orange avec déverrouillage automatique
- Marquage réfléchissant pour augmenter la visibilité nocturne
- Disponible aussi dans la version pour la décontamination

Spencer 122

Poids: 6,5 kg
Charge utile: 170 kg

Spencer 122 jaune	ST00120A
Spencer 122 orange	ST00122A
Spencer 122 militaire	ST00124A
Spencer 122 bleu	ST00125A

Spencer 122 décontamination

Poids: 6,5 kg
Charge utile: 170 kg

Spencer 122 décontamination	ST00126A
STX 14 sac de transport	ST00114A

Spencer 110/111 Brancard pliable en largeur

Il est utilisé par l'armée et dans les milieux sportifs; la mise en œuvre est rapide.

Le modèle Spencer 111 est équipé de quatre poignées télescopiques.

- Complet de deux sangles de maintien de couleur orange avec déverrouillage automatique
- Marquage réfléchissant pour augmenter la visibilité nocturne
- Disponible aussi dans la version pour la décontamination

Spencer 110

Poids: 6 kg
Charge utile: 170 kg

Spencer 110 jaune	ST30112A
Spencer 110 orange	ST30110A
Spencer 110 militaire	ST30113A
Spencer 110 bleu	ST30114A

Spencer 111


Poids: 6 kg
Charge utile: 170 kg

Spencer 111 jaune	ST30120A
Spencer 111 orange	ST30121A
Spencer 111 militaire	ST30122A
Spencer 111 bleu	ST30123A



Spencer 110 décontamination

Poids: 6 kg
Charge utile: 170 kg

Spencer 110 décontamination	ST30115A
STX 12 sac de transport	ST00112A

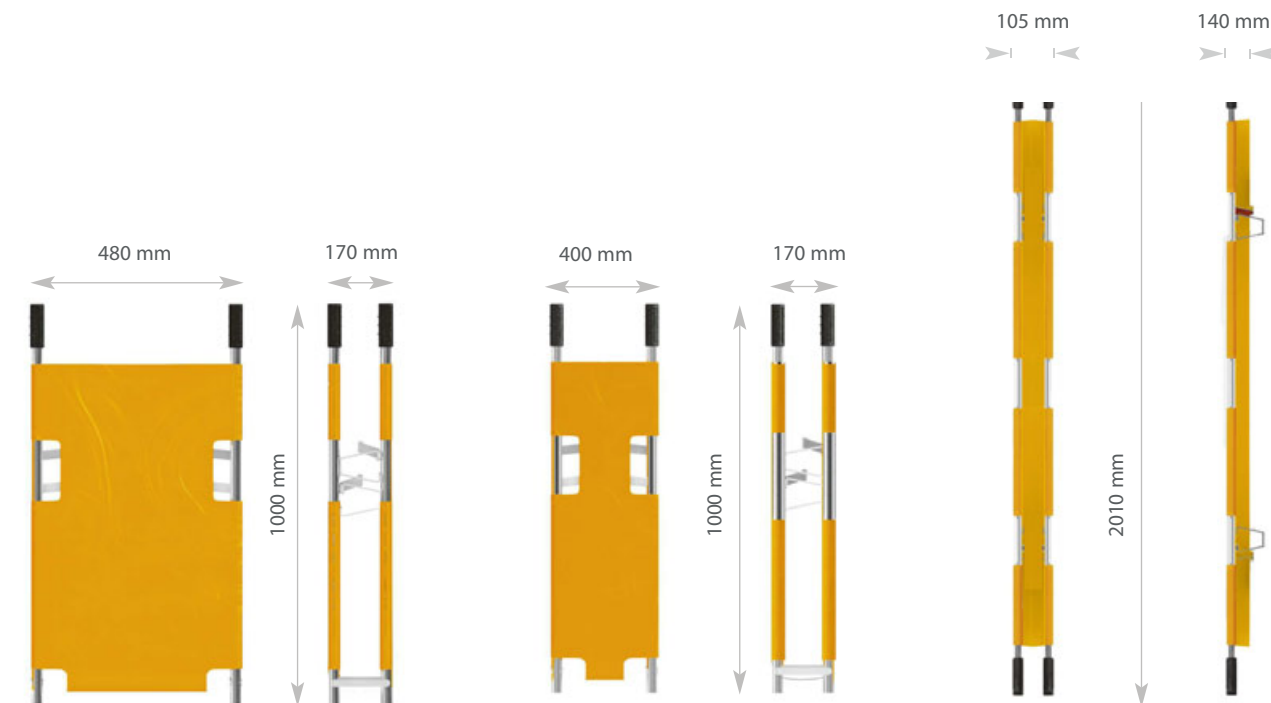

Disponible en différents coloris

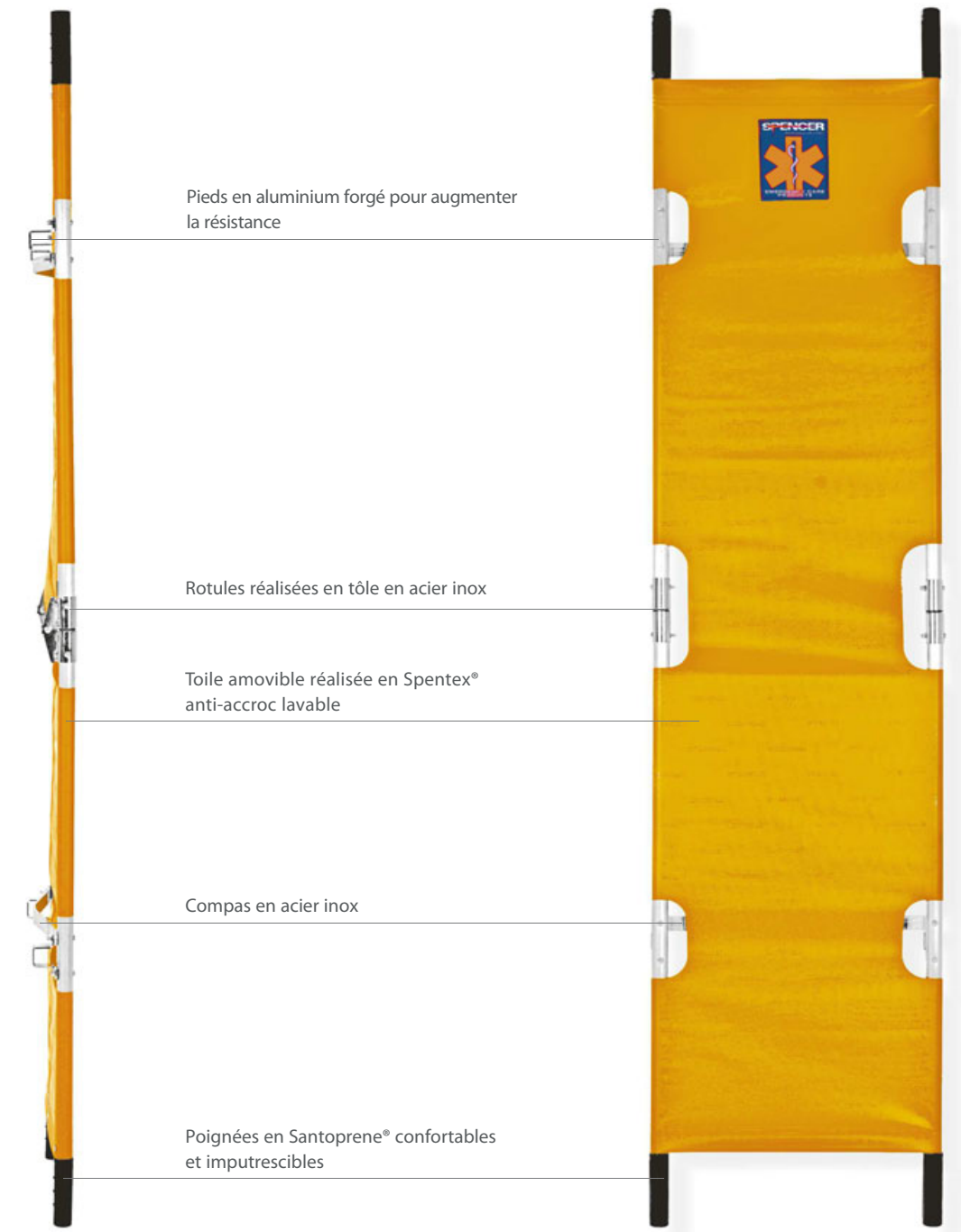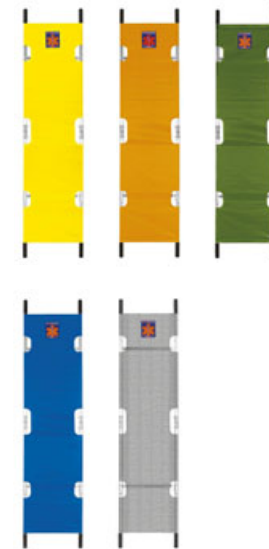

Série 100

La structure en aluminium caractérise ses qualités de légèreté et solidité. Pour garantir la stabilité même sur les terrains escarpés, les pieds sont réalisés en aluminium forgé et traité thermiquement. Le châssis en aluminium est relié à des plaquettes de distanciation en acier inox pour rendre complètement inoxydable toute la structure de la Série 100. Les rotules en acier inox résistent longitudinalement même à des charges élevées en sup-

portant le poids de la victime et en évitant des flexions ennuyeuses. La toile, réalisée en nylon 600 D enduit de vinyle Spentex®, imperméable, ignifugée, soudée avec des ultrasons, est facile à laver et à désinfecter. La Série 100 a été réalisée en évaluant pour toute la gamme des encombrements réduits pour le stockage et le transport, grâce à la structure qui se plie sur elle-même. C'est pour ça que les brancards d'urgence de la Série

100 sont indispensables comme brancards subsidiaires, dans l'organisation des maxi urgences, dans la prévention des accidents du travail et dans les activités sportives.

S	C	E	Comp 404	LXF
E	HP	P	200 x 200 mm	col 03 min 01
I	domaine	IS	LC	MC MI SP